

Aesculap Endoscopic Technology

Challenger Ti-P

Innowacja na skalę światową



Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system
do zakładania klipsów

Challenger Ti-P

Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system do zakładania klipsów

INNOWACJA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

Pierwszy **pneumatyczny** wielostrzałowy system do zakładania klipsów

- Łatwa i prosta obsługa
- Innowacyjna technologia – pneumatyczne ładowanie klipsów
- Szybkie, precyzyjne i pewne zakładanie klipsów
- Niezwykła jakość klipsów naczyniowych
- System Mieszany – Aplikator wielorazowego użytku oraz jednorazowego użytku magazynek z klipsami
- Jeden System z różnymi częściami roboczymi





Challenger Ti-P

Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system do zakładania klipsów




ML
medium large

magazynek z klipsami w sterylnym opakowaniu (magazynek z klipsami + nabój z CO₂), ostatni klips oznaczony kolorem

do aplikatora klipsów w wersji 10 mm


SM
small medium

do aplikatora klipsów w wersji 5 mm

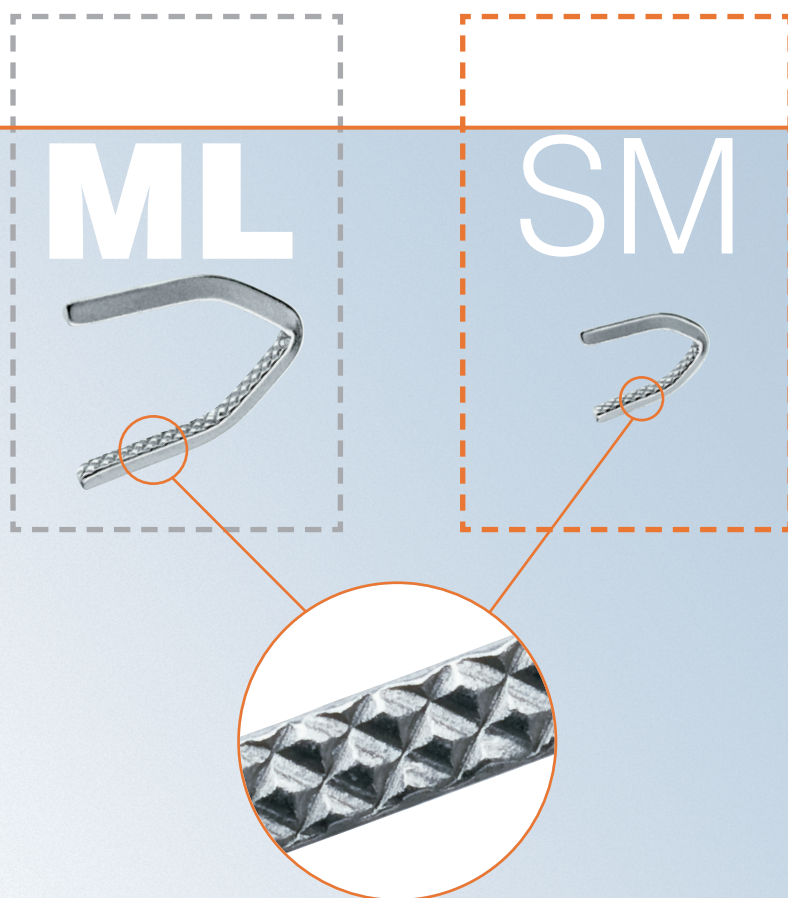

— Unikalny profil wewnętrzny klipsa zwiększający przyczepność klipsa do naczynia



— Największa możliwa powierzchnia styku zapobiega ześlizgiwaniu się klipsa z naczynia

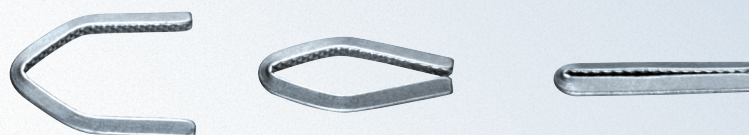

— Specjalny mechanizm zamykania klipsa zapobiega zmianie pozycji i niepożądanemu ześlizgiwaniu się klipsa z tkanki.

Challenger Ti-P

Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system do zakładania klipsów

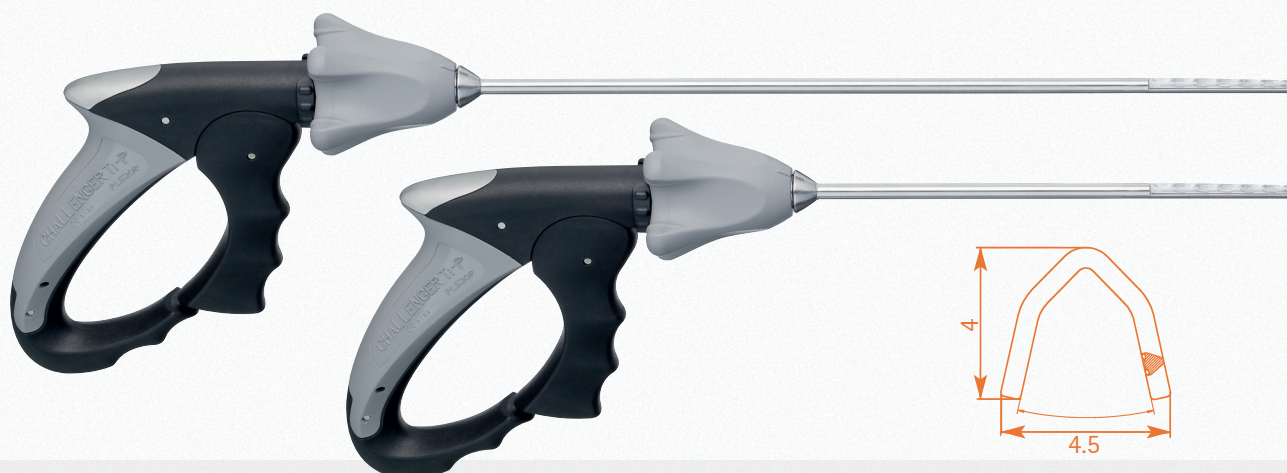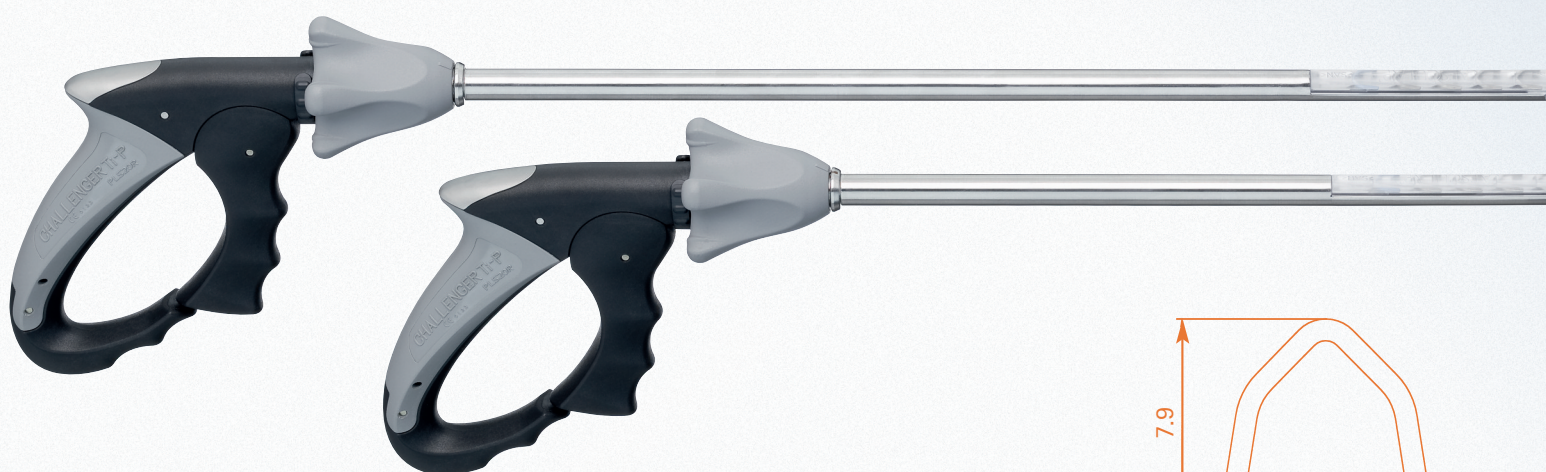



ML

Aplikator klipsów



PL606R

średnica 10 mm, długość robocza 370 mm



PL608R

średnica 10 mm, długość robocza 260 mm

PL579T

Opakowanie z klipsami



zawiera 12 sterylnych magazynków,
po się 8 tytanowych klipsów w każdym
i 12 naboji z CO₂, ostatni klips jest
oznaczony kolorem

rozmiar klipsa: **średnio-duży (ML)**

1.

SM

Aplikator klipsów



PL604R

średnica 5 mm, długość robocza 310 mm



PL603R

średnica 5 mm, długość robocza 205 mm

PL574T

Opakowanie z klipsami



zawiera 12 sterylnych magazynków,
po się 12 tytanowych klipsów w każdym
i 12 nabozi z CO₂, ostatni klips jest
oznaczony kolorem

rozmiar klipsa: **średnio-mały (SM)**


1:

Challenger Ti-P

Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system do zakładania klipsów

Komponenty i części zamienne

Część robocza kompletna	PL536R długość 370 mm średnica 10 mm	PL538R długość 260 mm średnica 10 mm	PL522R długość 310 mm średnica 5 mm	PL609R długość 205 mm średnica 5 mm
Tuleja wewnętrzna	PL536802 długość 370 mm	PL538802 długość 260 mm	PL522801 długość 310 mm	PL601801 długość 205 mm
Trzpień popychający	PL536801 długość 370 mm	PL538801 długość 260 mm	PL522800 długość 310 mm	PL601800 długość 205 mm
Rękojeść	PL520R	PL520R	PL520R	PL520R
Nabój z CO₂ Pakowane po 3 sztuki, opakowanie bezpośrednie sterylne	PL575SU	PL575SU	PL575SU	PL575SU
Pierścień zabezpieczający	PL520301	PL520301	PL520301	PL520301
	ML		SM	

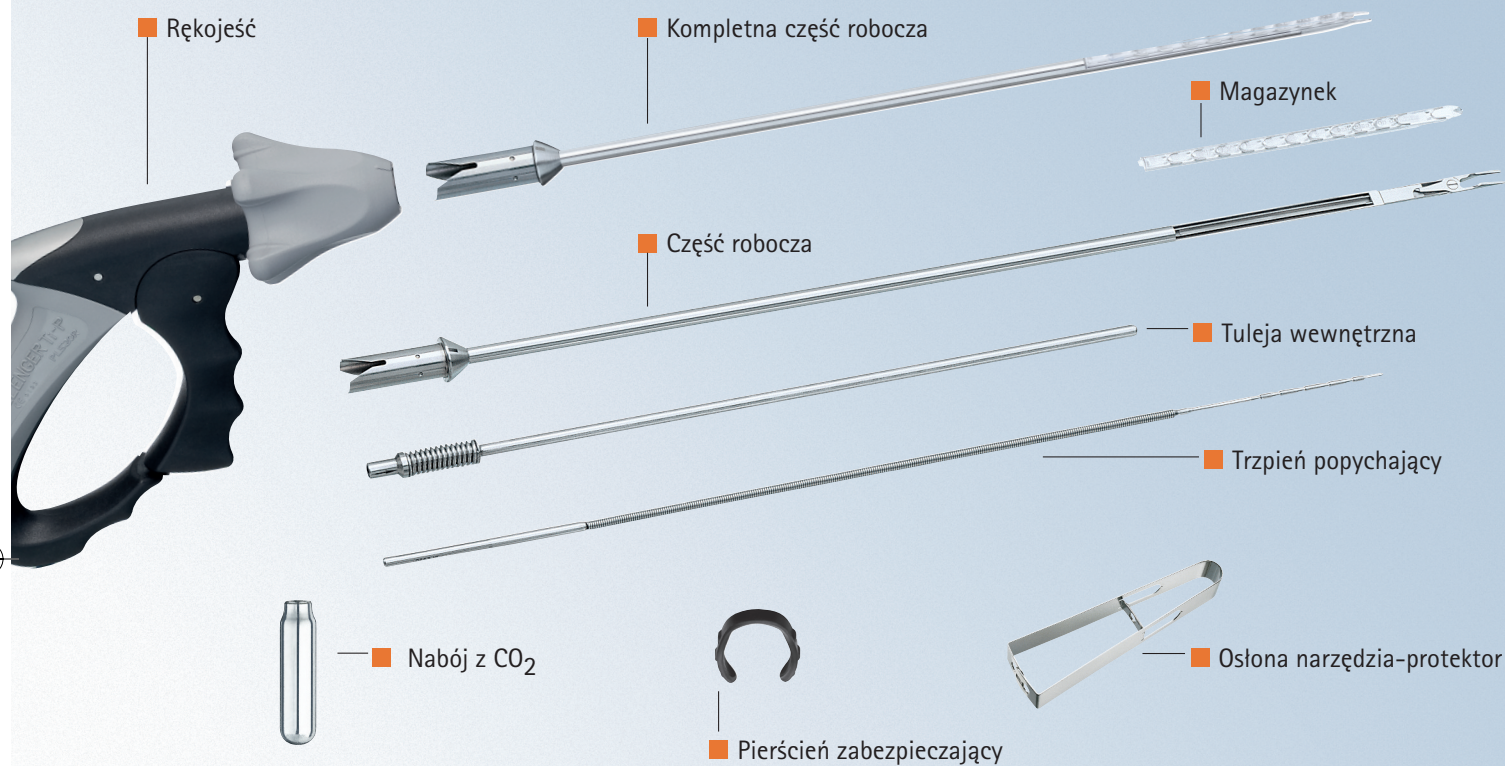

Do pielęgnacji polecamy


Oslona

PL522810

zabezpiecza końcówki robocze w trakcie sterylnego montażu, wyjmowania oraz mycia i dezynfekcji śr. 5 mm

PL536810

zabezpiecza końcówki robocze w trakcie sterylnego montażu, wyjmowania oraz mycia i dezynfekcji, śr. 10 mm

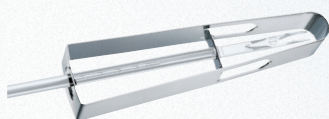

Olej w sprayu

JG600

Sterilit I, Pakowany po 6 szt. (zdjęcia nie zamieszczono)


Szczoteczka czyszcząca

GK469R

do czyszczenia tulei wewnętrznej, śr. 5 mm, dł. 550 mm, pakowane po 6 szt.

PM995R

do czyszczenia tulei zewnętrznej, śr. 10 mm, dł. 550 mm, pakowane po 6 szt.

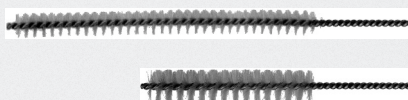

Challenger Ti-P

Pierwszy pneumatyczny wielostrzałowy system do zakładania klipsów



Sterylnie przygotowanie

Gotowy do użycia w 3 krokach

Krok 1

Połączyć rękojeść i część roboczą



Krok 2

Wsunąć nabój z CO₂



Krok 3

Zamocować magazynek z klipsami





Horyzonty Wiedzy. Kompetencje w zakresie kształtowania przyszłości.

Aesculap Akademia to prestiżowe forum prowadzone z myślą o zaawansowanym i ciągłym poszerzaniu wiedzy z zakresu medycyny. Pod kuratelą firmy B.Braun Aesculap Akademia oferuje już od 1995 roku kompleksowy program kursów i szkoleń.

Atrakcyjne centra szkoleniowe w Tuttlingen oraz Langebeck-Virchow-House w Berlinie zapewniają doskonałe warunki szkoleniowe, a stosowanie najnowszych metod szkoleń gwarantuje maksymalny sukces prowadzonych szkoleń i dobre przygotowanie do przyszłej pracy.



www.aesculap-academia.pl



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Tel. 61 44 20 100
Fax 61 44 20 938

www.chifa.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec modyfikacjom. Niniejsza ulotka może być stosowana wyłącznie w celach oferowania, kupowania i sprzedawania naszych produktów. Żadna jej część nie może być w jakiegokolwiek formie powielana ani kopiowana. W przypadku niewłaściwego wykorzystania treści zawartych w niniejszej ulotce zastrzegamy sobie prawo do wycofania naszych katalogów oraz cenników i do podjęcia stosownych czynności prawnych.

Broszura Nr C623