

Aesculap[®] Odgryzacze kostne

Obszerna gama odgryzaczy kostnych firmy Aesculap!



Neurochirurgia Aesculap

Odgryzacze Kostne KERRISON firmy Aesculap



Nierozkładalny Odgryzacz Kostny KERRISON

Sprawdzony

...klasyk wśród narzędzi od ponad 100 lat. O jego charakterze stanowią elegancja, smukła konstrukcja oraz doskonałe właściwości tnące.



Aesculap – tradycja wysokiej jakości!

Aesculap produkuje odgryzacze kostne KERRISON od ponad 100 lat.

Na całym świecie „Wyprodukowano przez Aesculap” oznacza wysoką jakość i wytrzymałość.

Rozkładany Odgryzacz Kostny KERRISON

Rozkładany

...jedynie 3 kroki pozwalają na jego rozłożenie w celu skutecznego wyczyszczenia i to bez dodatkowych narzędzi.

Od surowca do odgryzacza kostnego KERRISON.

Wysoka jakość odgryzaczy kostnych KERRISON firmy Aesculap to efekt wieloletniego doświadczenia naszych pracowników oraz świadomości wymagań jakościowych.



**KERRISON Noir®
Odgryzacz Kostny**

Estetyczny

...rozkładalny, o specjalnej czarnej powłoce zmniejszającej odbicie światła w polu operacyjnym.

**Specjalne Odgryzacze
Kostne KERRISON**

Specjalny

...bez względu na to czy jest zakrzywiony, w kształcie bagnetu, ekstra długi, średniego rozmiaru czy o dużej szczęce - zapewniamy odpowiednie rozwiązanie.

**KAIRison® Pneumatyczny
Odgryzacz Kostny**

Pneumatyczny

... lżejsza obsługa - technologia, która sprawia, że życie staje się prostsze.

Umiejętne i profesjonalne ręczne wykonanie

Aby zapewnić wysoką jakość działania, każdy produkt jest ręcznie wykonany, a następnie sprawdzony.

Aesculap® Odgryzacz kostne

Nierozkładalne odgryzacz KERRISON

Sprawdzony

Cienka stopka

Wyrazista, złota dystalna końcówka odgryzaczy KERRISON

Szerokie rozwarcie szczęki odgryzaczy

Te odgryzacz oferują 66% szersze rozwarcie szczęki w porównaniu ze standardowymi.

<<<< Duże rozwarcie szczęki >>>>
15 mm

< Standardowe rozwarcie >
8 - 12 mm




Wersja ekstra długa

Odgryzacz o długości 280 mm stanowi dopełnienie oferowanego przez firmę asortymentu.

Jego specjalna zwiększona długość oferuje wystarczające rezerwy na pokonanie odległości do miejsca zastosowania.

for delicate use only

Odgryzacz z cienką stopką stosowane wyłącznie do usuwania małych kawałków kości i kanki miękkiej.

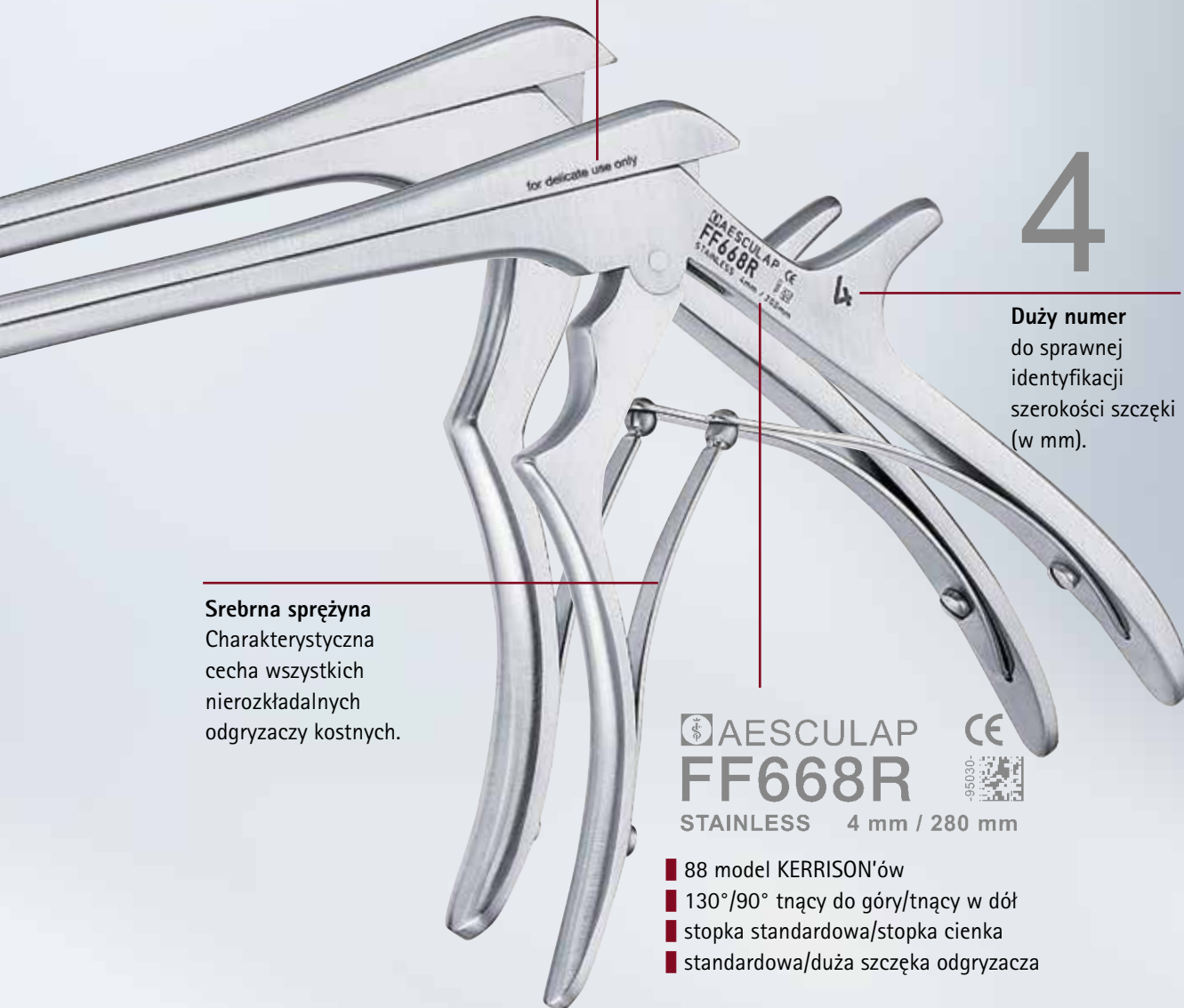

Srebrna sprężyna
Charakterystyczna cecha wszystkich nierozkładalnych odgryzaczy kostnych.

4

Duży numer
do sprawnej identyfikacji szerokości szczęki (w mm).

AESCULAP
FF668R
STAINLESS 4 mm / 280 mm




- 88 model KERRISON'ów
- 130°/90° tnący do góry/tnący w dół
- stopka standardowa/stopka cienka
- standardowa/duża szczęka odgryzacza

■ Długość:	180 mm (7")
	200 mm (8")
	230 mm (9")
	280 mm (11")
■ Szerokość szczęki:	1 - 6 mm
	1.5 mm szer.
■ Rozmiary pośrednie:	2.5 mm szer.
■ Bez wyrzutnika	



Aesculap® Odgryzacz kostne


Nierozkładalne odgryzacz KERRISON

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do góry

		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
Długość	Szerokość			
180 mm	1.0 mm	FF715R (8)	- -	FF771R (8)
	1.5 mm	FF638R (9)	FF647R (15)	FF645R (9)
	2.0 mm	FF717R (9)	FF677R (15)	FF772R (9)
	2.5 mm	FF639R (10)	FF648R (15)	FF646R (10)
	3.0 mm	FF720R (10)	FF678R (15)	FF773R (10)
	4.0 mm	FF724R (12)	FF679R (15)	FF769R (12)
	5.0 mm	FF722R (12)	FF680R (15)	FF770R (12)
	6.0 mm	FF726R (12)	FF681R (15)	- -
200 mm	1.0 mm	FF691R (8) Nowy	- -	FF661R (8)
	1.5 mm	FF649R (9)	- -	FF658R (9)
	2.0 mm	FF737R (9)	FF660R (15)	FF662R (9)
	2.5 mm	FF657R (10)	- -	FF659R (10)
	3.0 mm	FF738R (10)	FF739R (15)	FF663R (10)
	4.0 mm	FF727R (12)	FF745R (15)	FF664R (12)
	5.0 mm	FF728R (12)	FF751R (15)	FF665R (12)
	6.0 mm	FF729R (12)	FF753R (15)	- -
230 mm	1.0 mm	FF674R (8) Nowy	- -	FF734R (8) Nowy
	2.0 mm	FF682R (9)	- -	FF746R (9)
	3.0 mm	FF683R (10)	- -	FF747R (10)
	4.0 mm	FF684R (12)	- -	FF748R (12)
	5.0 mm	FF685R (12)	- -	FF749R (12)
280 mm	1.0 mm	FF696R (8) Nowy	- -	FF673R (8) Nowy
	2.0 mm	FF686R (9) Nowy	- -	FF666R (9)
	3.0 mm	FF687R (10) Nowy	- -	FF667R (10)
	4.0 mm	FF688R (12) Nowy	- -	FF668R (12)
	5.0 mm	FF689R (12) Nowy	- -	FF669R (12)

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do dołu

		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
Długość	Szerokość			
180 mm	1.0 mm	FF711R (8)	- -	FF781R (8)
	2.0 mm	FF712R (9)	- -	FF782R (9)
	3.0 mm	FF713R (10)	- -	FF783R (10)
	4.0 mm	FF714R (12)	- -	FF784R (12)
	5.0 mm	FF725R (12)	- -	FF785R (12)

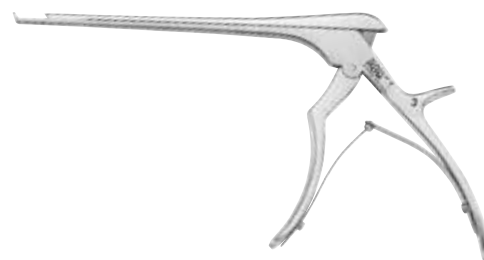

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do dołu

		Stopka		
		Standardowa		
		Szczęka		
		Standard (mm)		
Długość	Szerokość			
		230 mm	2.0 mm	FF692R (9)
			3.0 mm	FF693R (10)
			4.0 mm	FF694R (12)
			5.0 mm	FF695R (12)

Szczęka skierowana pod kątem 90°, do góry

		Stopka		
		Standardowa		
		Szczęka		
		Standardowa (mm)		
Długość	Szerokość			
		180 mm	1.0 mm	FF716R (8)
			2.0 mm	FF718R (9)
			3.0 mm	FF750R (10)
			4.0 mm	FF752R (12)
			5.0 mm	FF754R (12)
			6.0 mm	FF755R (12)

Szczęka skierowana pod kątem 90°, do dołu

		Stopka		
		Standardowa		
		Szczęka		
		Standardowa (mm)		
Długość	Szerokość			
		180 mm	1.0 mm	FF741R (8)
			2.0 mm	FF719R (9)
			3.0 mm	FF721R (10)
			4.0 mm	FF742R (12)
			5.0 mm	FF723R (12)
			6.0 mm	FF743R (12)

Wszystkie nierozkładalne odgryzacze KERRISON bez Wyrzutnika

Szerokość (mm)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0



Aesculap® Odgryzacz kostne

Rozkładane odgryzacz KERRISON

Rozkładany

- Łatwy montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi
- Skuteczne czyszczenie i sterylizacja

Demontaż w 3 krokach:

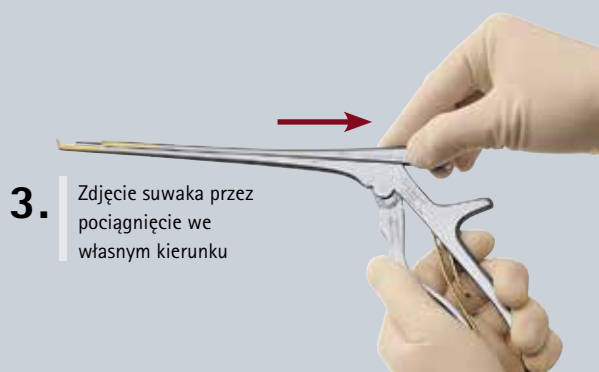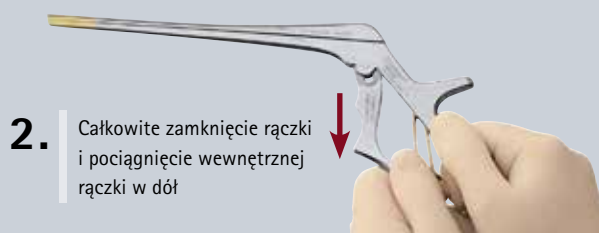

(Instrukcja złożenia na stronie 12)


Rozkładany odgryzacz KERRISON z cienką stopką łatwo rozpoznawalny dzięki złotej końcówce dystalnej.



Wyrzutnik – do łatwego usuwania wyciętego materiału.

for delicate use only

Odgryzacz z cienką stopką stosowane są wyłącznie do usuwania małych kawałków kości i tkanki miękkiej.

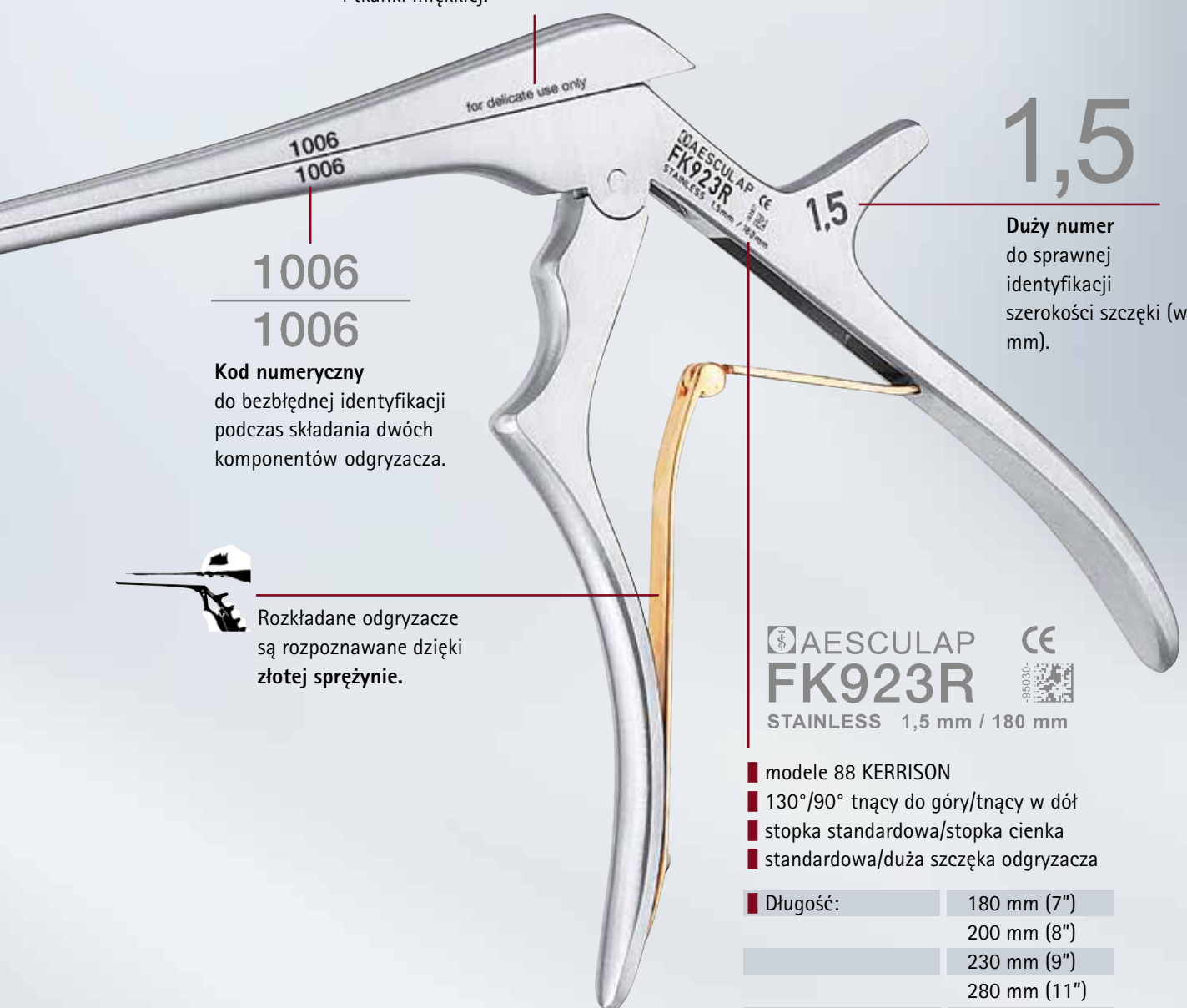

1006
1006

Kod numeryczny
do bezbłędnej identyfikacji
podczas składania dwóch
komponentów odgryzacza.

Rozkładane odgryzacz
są rozpoznawane dzięki
złotej sprężynie.

1,5

Duży numer
do sprawniej
identyfikacji
szerokości szczęki (w
mm).

AESCULAP CE
FK923R
STAINLESS 1,5 mm / 180 mm

- modele 88 KERRISON
- 130°/90° tnący do góry/tnący w dół
- stopka standardowa/stopka cienka
- standardowa/duża szczęka odgryzacza

■ Długość:	180 mm (7")
	200 mm (8")
	230 mm (9")
	280 mm (11")


■ Szerokość szczęki: 1 - 6 mm

■ Rozmiary pośrednie: 1.5 mm szer.
2.5 mm szer.


Aesculap® Odgryzacz kostne

Rozkładane odgryzacz KERRISON

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do góry

		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
Długość	Szerokość			
180 mm	1.0 mm	FK900R (8)	-	FK906R (8)
	1.5 mm	FK911R (9)	FK941R (15)	FK923R (9)
	2.0 mm	FK901R (9)	FK971R (15)	FK907R (9)
	2.5 mm	FK912R (10)	FK942R (15)	FK924R (10)
	3.0 mm	FK902R (10)	FK972R (15)	FK908R (10)
	4.0 mm	FK903R (12)	FK973R (15)	FK909R (12)
	5.0 mm	FK904R (12)	FK974R (15)	FK910R (12)
200 mm	6.0 mm	FK905R (12)	FK975R (15)	-
	1.0 mm	FK960R (8) Nowy	-	FK961R (8)
	1.5 mm	FK966R (9)	-	FK968R (9)
	2.0 mm	FK913R (9)	FK970R (15)	FK962R (9)
	2.5 mm	FK967R (10)	-	FK969R (10)
	3.0 mm	FK914R (10)	FK982R (15)	FK963R (10)
	4.0 mm	FK915R (12)	FK983R (15)	FK964R (12)
230 mm	5.0 mm	FK916R (12)	FK984R (15)	FK965R (12)
	6.0 mm	FK917R (12)	FK985R (15)	-
	1.0 mm	FK918R (8) Nowy	-	FK929R (8) Nowy
	2.0 mm	FK919R (9)	-	FK925R (9)
	3.0 mm	FK920R (10)	-	FK926R (10)
280 mm	4.0 mm	FK921R (12)	-	FK927R (12)
	5.0 mm	FK922R (12)	-	FK928R (12)
	1.0 mm	FK981R (8) Nowy	-	FK980R (8) Nowy
	2.0 mm	FK986R (9) Nowy	-	FK976R (9)
	3.0 mm	FK987R (10) Nowy	-	FK977R (10)
	4.0 mm	FK988R (12) Nowy	-	FK978R (12)
	5.0 mm	FK989R (12) Nowy	-	FK979R (12)

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do dołu

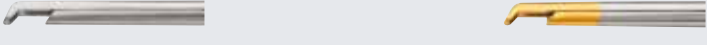		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
Długość	Szerokość			
180 mm	1.0 mm	FK930R (8)	-	FK936R (8)
	2.0 mm	FK931R (9)	-	FK937R (9)
	3.0 mm	FK932R (10)	-	FK938R (10)
	4.0 mm	FK933R (12)	-	FK939R (12)
	5.0 mm	FK934R (12)	-	FK940R (12)



Szczęka skierowana pod kątem 130°, do dołu

		Stopka	
		Standardowa	
		Szczęka	
		Standardowa (mm)	
Długość	Szerokość		
230 mm	2.0 mm	FK943R	(9)
	3.0 mm	FK944R	(10)
	4.0 mm	FK945R	(12)
	5.0 mm	FK946R	(12)

Szczęka skierowana pod kątem 90°, do góry

		Stopka	
		Standardowa	
		Szczęka	
		Standardowa (mm)	
Długość	Szerokość		
180 mm	1.0 mm	FK948R	(8)
	2.0 mm	FK949R	(9)
	3.0 mm	FK950R	(10)
	4.0 mm	FK951R	(12)
	5.0 mm	FK952R	(12)
	6.0 mm	FK953R	(12)

Szczęka skierowana pod kątem 90°, do dołu

		Stopka	
		Standardowa	
		Szczęka	
		Standardowa (mm)	
Długość	Szerokość		
180 mm	1.0 mm	FK954R	(8)
	2.0 mm	FK955R	(9)
	3.0 mm	FK956R	(10)
	4.0 mm	FK957R	(12)
	5.0 mm	FK958R	(12)
	6.0 mm	FK959R	(12)

Wyrzutnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerokość (mm)	1.0 <input type="checkbox"/>	1.5 <input type="checkbox"/>	2.0 <input type="checkbox"/>	2.5 <input type="checkbox"/>	3.0 <input type="checkbox"/>	4.0 <input type="checkbox"/>	5.0 <input type="checkbox"/>	6.0 <input type="checkbox"/>	


Aesculap® Odgryzacze kostne

Noir® – odgryzacze KERRISON powlekane

Estetyczny

- Łatwy montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi
- Skuteczne czyszczenie i sterylizacja
- Czarna Powłoka Noir® – pożegnaj się z dokuczliwym odbijaniem światła

Montaż w 3 krokach:

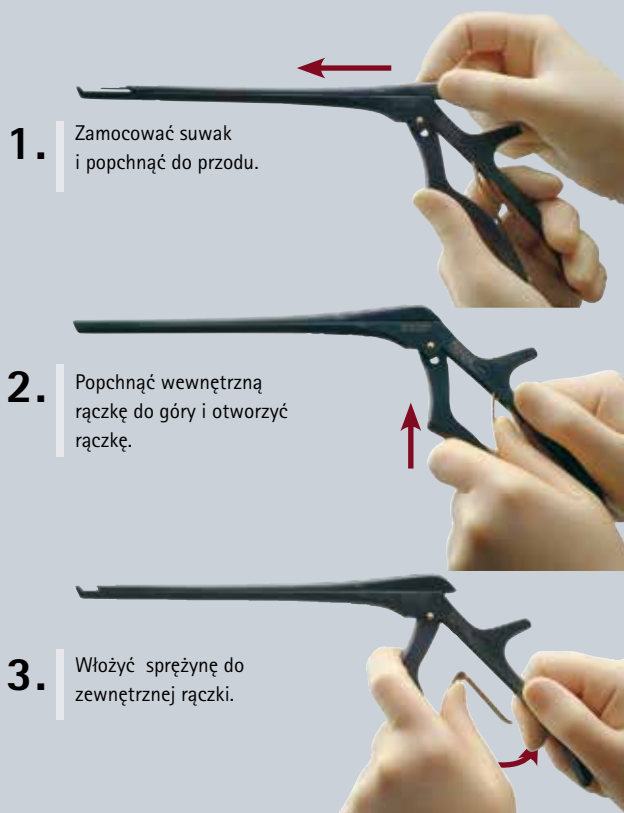

(Instrukcja demontażu na stronie 8)


Czarna powłoka chroni przed rozpraszającym odbiciem światła.



Wyrzutnik – do łatwego usuwania wyciętego materiału.

for delicate use only

Odgryzacze z cienką stopką stosowane są wyłącznie do usuwania małych kawałków kości i tkanki miękkiej.

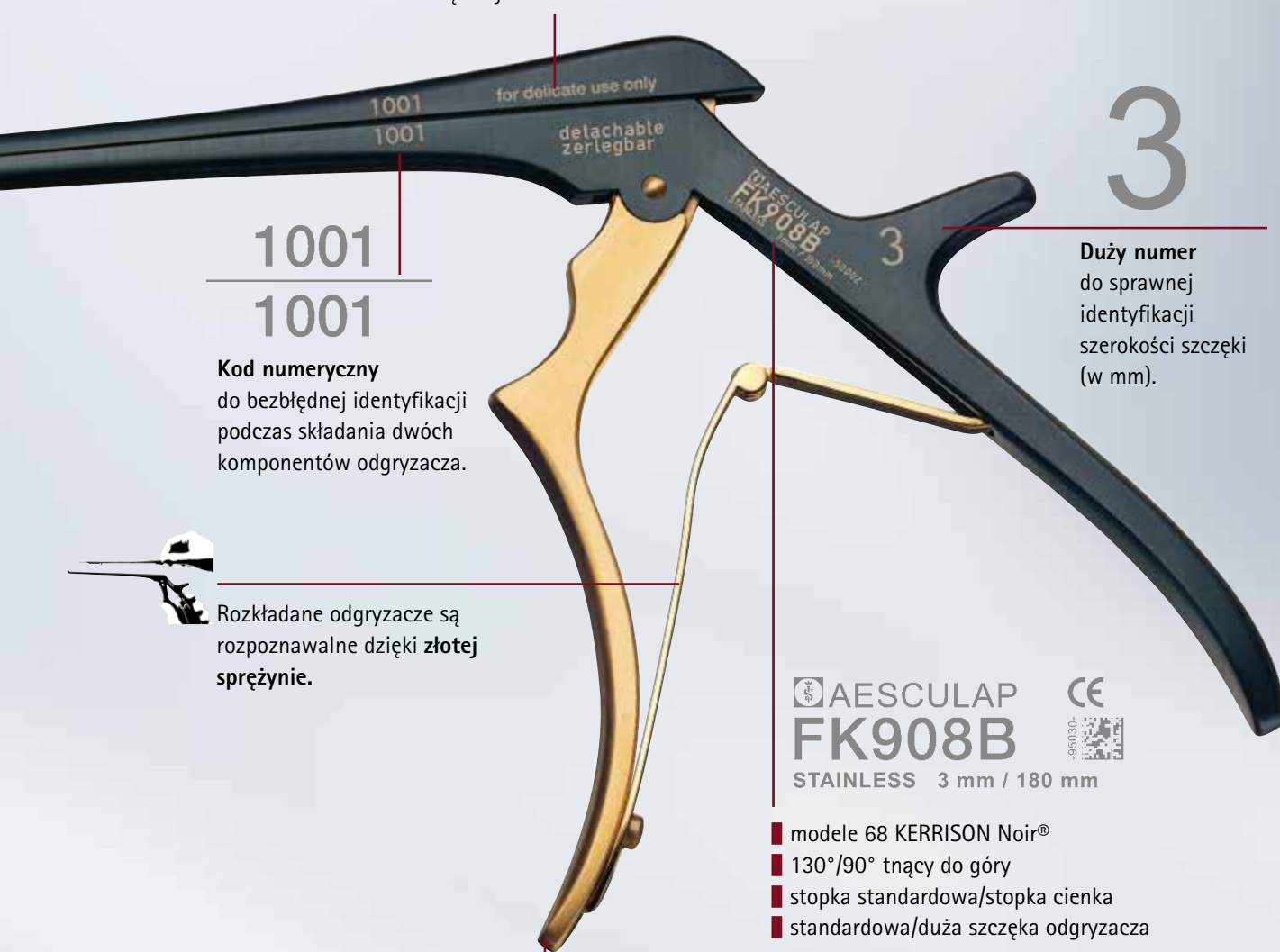

1001
1001

Kod numeryczny
do bezbłędnej identyfikacji
podczas składania dwóch
komponentów odgryzacza.



Rozkładane odgryzacze są
rozpoznawalne dzięki **złotej**
sprężynie.

3

Duży numer
do sprawnej
identyfikacji
szerokości szczęki
(w mm).

AESCULAP
FK908B
STAINLESS 3 mm / 180 mm

CE



- modele 68 KERRISON Noir®
- 130°/90° tnący do góry
- stopka standardowa/stopka cienka
- standardowa/duża szczęka odgryzacza

■ Długość:	180 mm (7")
	200 mm (8")
	230 mm (9")
	280 mm (11")

■ Szerokość szczęki: 1 - 6 mm




■ Rozmiary pośrednie: 1.5 mm szer.
2.5 mm szer.

KERRISON Noir® odgryzacze
z **cienką stopką** są
rozpoznawalne dzięki swoim
złotym wewnętrznym rączkom.

Aesculap® Odgryzacz kostne

Noir® – odgryzacz KERRISON powlekane

Szczęka skierowana pod kątem 130°, do góry

		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
				
Długość 180 mm	Szerokość			
	1.0 mm	FK900B (8)	- -	FK906B (8)
	1.5 mm	FK911B (9)	FK941B (15)	FK923B (9)
	2.0 mm	FK901B (9)	FK971B (15)	FK907B (9)
	2.5 mm	FK912B (10)	FK942B (15)	FK924B (10)
	3.0 mm	FK902B (10)	FK972B (15)	FK908B (10)
	4.0 mm	FK903B (12)	FK973B (15)	FK909B (12)
	5.0 mm	FK904B (12)	FK974B (15)	FK910B (12)
200 mm	6.0 mm	FK905B (12)	FK975B (15)	- -
	1.0 mm	FK960B (8) Nowy	- -	FK961B (8)
	1.5 mm	FK966B (9)	- -	FK968B (9)
	2.0 mm	FK913B (9)	FK970B (15)	FK962B (9)
	2.5 mm	FK967B (10)	- -	FK969B (10)
	3.0 mm	FK914B (10)	FK982B (15)	FK963B (10)
	4.0 mm	FK915B (12)	FK983B (15)	FK964B (12)
	5.0 mm	FK916B (12)	FK984B (15)	FK965B (12)
230 mm	6.0 mm	FK917B (12)	FK985B (15)	- -
	1.0 mm	FK918B (8) Nowy	- -	FK929B (8) Nowy
	2.0 mm	FK919B (9) Nowy	- -	FK925B (9)
	3.0 mm	FK920B (10) Nowy	- -	FK926B (10)
	4.0 mm	FK921B (12) Nowy	- -	FK927B (12)
280 mm	5.0 mm	FK922B (12) Nowy	- -	FK928B (12)
	1.0 mm	FK981B (8) Nowy	- -	FK980B (8) Nowy
	2.0 mm	FK986B (9) Nowy	- -	FK976B (9)
	3.0 mm	FK987B (10) Nowy	- -	FK977B (10)
	4.0 mm	FK988B (12) Nowy	- -	FK978B (12)
	5.0 mm	FK989B (12) Nowy	- -	FK979B (12)

Jaw position 90°, upwards

		Stopka		
		Standardowa	Standardowa	Cienka
		Szczęka		
		Standardowa (mm)	Duża (mm)	Standardowa (mm)
				
Długość 180 mm	Szerokość			
	1.0 mm	FK948B (8)	- -	- -
	2.0 mm	FK949B (9)	- -	- -
	3.0 mm	FK950B (10)	- -	- -
	4.0 mm	FK951B (12)	- -	- -
	5.0 mm	FK952B (12)	- -	- -
	6.0 mm	FK953B (12)	- -	- -



Estetyczny

Wyrzutnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerokość (mm)	1.0 <input type="checkbox"/>	1.5 <input type="checkbox"/>	2.0 <input type="checkbox"/>	2.5 <input type="checkbox"/>	3.0 <input type="checkbox"/>	4.0 <input type="checkbox"/>	5.0 <input type="checkbox"/>	6.0 <input type="checkbox"/>	

Aesculap® Odgryzacz kostne

Specjalne odgryzacz kostne KERRISON

Specjalne

Poza standardowymi odgryzaczami, firma Aesculap oferuje szeroką gamę specjalnych odgryzaczy kostnych dla niemal każdej sytuacji chirurgicznej.

■ 8 specjalnych odgryzaczy bagnetowych i zakrzywionych

- Klasyczne nierozkładalne odgryzacz kostne z zakrzywioną do góry szczęką dla łatwego usuwania materiału kostnego, szczególnie między łukami kręgow.

Zakrzywione odgryzacz KERRISON, tnące do góry

Długość	Szerokość	Szczęka	Nr katalogowy
200 mm	2.0 mm	10 mm	FF466R
	3.0 mm	10 mm	FF467R
	4.0 mm	10 mm	FF468R
	5.0 mm	10 mm	FF469R

- Klasyczne nierozkładalne bagnetowe odgryzacz kostne dla optymalnego widoku operacyjnego nad trzonkiem narzędzia.

Bagnetowe odgryzacz kostne KERRISON, 130°, tnące do góry

Długość	Szerokość	Długość robocza	Szczęka	Nr katalogowy
240 mm	2.0 mm	170 mm	10 mm	FF496R
	3.0 mm	170 mm	10 mm	FF497R
	4.0 mm	170 mm	10 mm	FF498R
	5.0 mm	170 mm	10 mm	FF499R

■ Ekstra długie – 12 modeli KERRISON




■ Rozmiary pośrednie – 30 modeli KERRISON



■ Duża szczęka – 36 modeli KERRISON



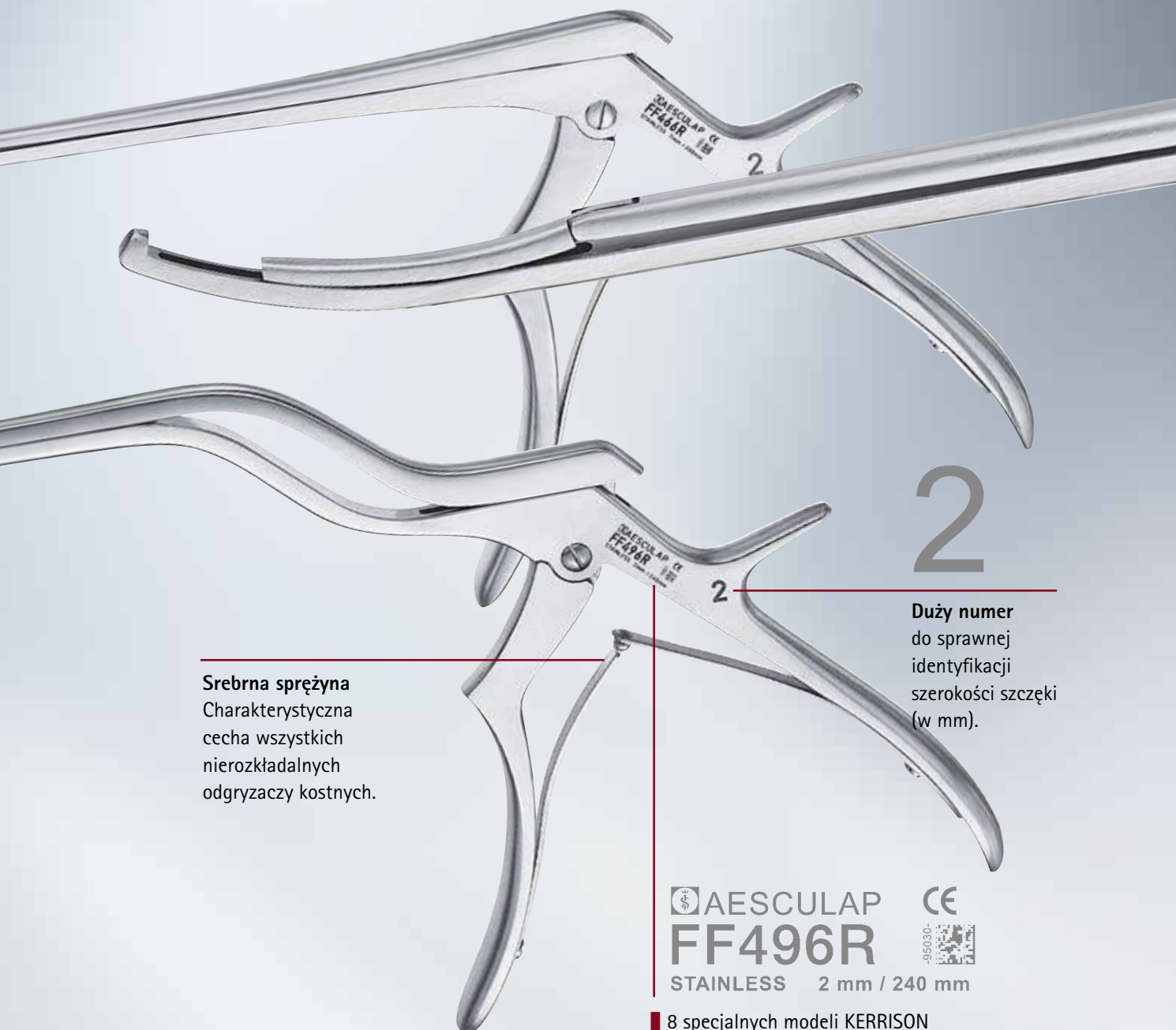



Srebrna sprężyna
Charakterystyczna
cecha wszystkich
nierozkładalnych
odgryzaczy kostnych.

2

Duży numer
do sprawnej
identyfikacji
szerokości szczęki
(w mm).

 **AESCU LAP** 
FF496R
STAINLESS 2 mm / 240 mm

- 8 specjalnych modeli KERRISON
- w kształcie bagnetu dla optymalnego widoku
- zakrzywiony w celu łatwiejszego dotarcia do trudno dostępnych miejsc
- Długość: 200 mm (8")
- Szerokość szczęki: 2 - 5 mm
- Bez wyrzutnika


Aesculap[®] Odgryzacz kostne

Aesculap[®] System organizowania narzędzi

Powody przemawiające za koszami narzędziowymi firmy Aesculap:

- Specjalne Uchwyty JF120R do przechowywania odgryzaczy kostnych
- Z dużą perforacją z przeznaczeniem w szczególności do mycia narzędzi z większych zanieczyszczeń (np. wióry kostne)
- Gładkie powierzchnie chroniące przed uszkodzeniem rękawiczek chirurgicznych
- Dodatkowy komfort stosowania za sprawą lekkiej konstrukcji
- Obszerna gama produktów oferujących rozwiązania nie tylko dla wykorzystania koszy narzędziowych w Systemie Magazynowania Produktów Sterylnych w Kontenerach, ale również dla materiałów do jednorazowego użytku
- W pełni kompatybilne z Systemem Organizowania Narzędzi Aesculap




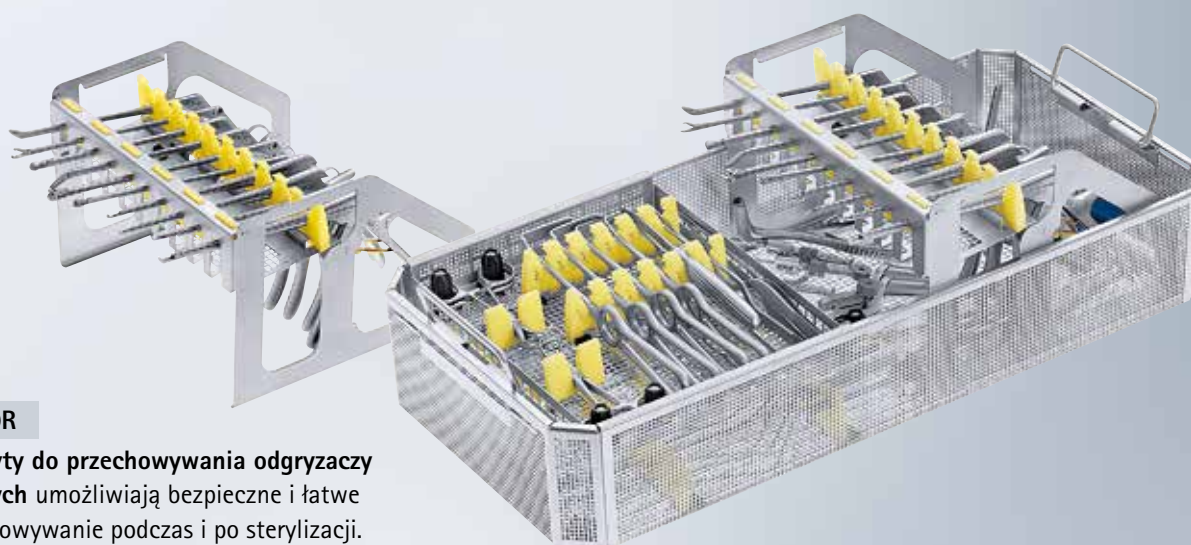

JF120R

Uchwyty do przechowywania odgryzaczy kostnych umożliwiają bezpieczne i łatwe przechowywanie podczas i po sterylizacji.


Przykładowe zastosowanie:
Zestaw do przezklinowej operacji guzów przysadki

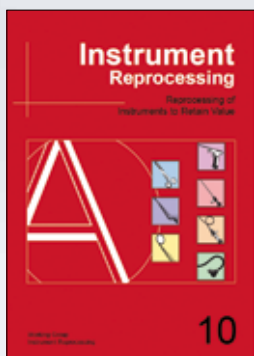

Dalsze informacje na temat oczyszczania narzędzi znajdują się w broszurze „Proper Maintenance of Instruments”.



Informacje dotyczące demontażu oraz oczyszczania odgryzacza kostnego KERRISON dostępne również na plakacie KERRISON C22911.

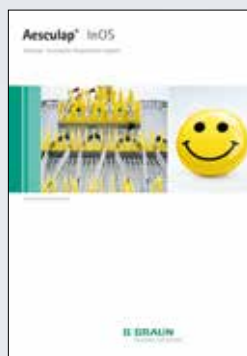

Dalsze informacje na temat Systemu Organizowania Narzędzi Aesculap znaleźć można na broszurze C81902.

Aesculap® Odgryzacze kostne

KAIRison® odgryzacze pneumatyczne

Korzyści

- Łatwy w użytkowaniu
- Lżejsza obsługa
- Odciąża ręce i stawy
- Mniejsze ryzyko obniżonej sprawności motorycznej związanej ze zmęczeniem
- Innowacyjny mechanizm bezpieczeństwa
- Krótka krzywa uczenia
- Wzorowa równowaga
- Odpowiedni do użytku zarówno dla prawo jak i lewo ręcznych
- Niezawodny
- Ergonomiczna konstrukcja

Opinie

"Gdy pierwszy raz użyłem odgryzacza KAIRison® zastanawiałem się dlaczego to wyjątkowe narzędzie nie zostało stworzone 20 lat wcześniej."

Dr. Joseph Maroon, UPMC, Pittsburgh, PA, USA

Technologia, która sprawia, że życie staje się prostsze.





Bezpieczeństwo

Podczas czyszczenia odgryzacza należy wcisnąć zapadkę zabezpieczającą aby zablokować mechanizm spustowy.



Blokada i zwolnienie blokady
Szybka i łatwa wymiana trzonu.



Przycisk ON i OFF
Gdy odgryzacz kostny pozostaje w stanie bezczynności należy go zablokować przełącznikiem on/off by nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia.



Całkowita kontrola

Narzędzie wyposażono w dwustopniową regulację mocy. Aby nastawić odgryzacz kostny należy lekko przycisnąć spust do momentu wyczucia oporu. Aby zatrzymać przepływ powietrza w dowolnym momencie należy zwolnić spust, a odgryzacz kostny powróci do jego pierwotnej pozycji - bez odcięcia. Aby odciąć kość należy maksymalnie docisnąć spust.



Powietrze centralne na bloku

Po prostu podłącz do istniejącego gniazda sprężonego powietrza znajdującego się w sali operacyjnej.

Aesculap® Odgryzacz kostne

KAIRison® odgryzacz pneumatyczny

W zaledwie 3 prostych krokach



1. Podłączenie wężyka do wylotu sprężonego powietrza znajdującego się w sali operacyjnej. Następnie podłączenie wężyka do reduktora ciśnienia oraz przyłączenie jednorazowej rurki do rączki.



2. Wsuniecie trzonu i obracanie w kierunku rączki do momentu zatrzaśnięcia, gdy znajdzie się we właściwej pozycji. Należy sprawdzić czy trzon został poprawnie umiejscowiony.




3. Ustawienie przełącznika odgryzacza KAIRison® do pozycji „on”. Odgryzacz jest teraz gotowy do użycia. To takie proste.



C25511
plakat z krótką instrukcją
KAIRison®

Łatwa wymiana trzonu

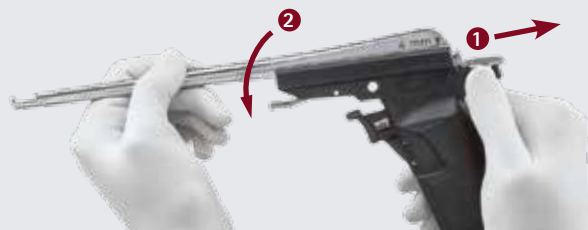

1. Odciągnięcie dźwigni i obrócenie trzonu (2).




2. Aby zdjąć trzon wystarczy go unieść.



3. Wsuniecie nowego trzonu (1) i odwrócenie w kierunku rączki do momentu zatrzaśnięcia gdy znajdzie się we właściwej pozycji (2).



C25411
plakat z instrukcją montażu/
demontażu KAIRison®

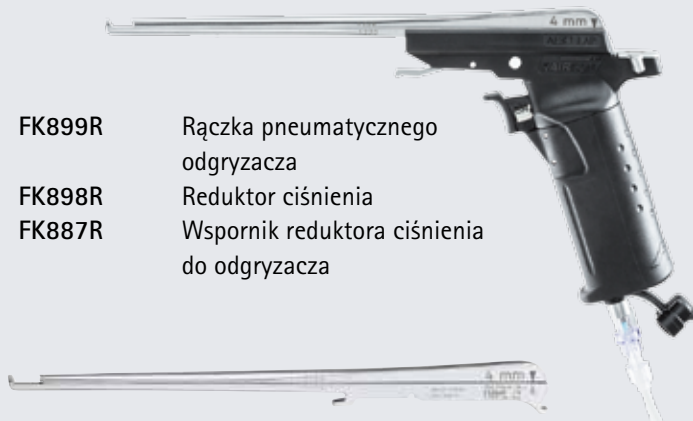

Wspornik reduktora ciśnienia do odgryzacza



Reduktor ciśnienia

FK899R Rączka pneumatycznego odgryzacza
 FK898R Reduktor ciśnienia
 FK887R Wspornik reduktora ciśnienia do odgryzacza




Długość	Trzon	Szerokość	Stopka	Długość robocza	Szczeka	Ejector
235 mm	FK882R	2 mm 	standardowa	140 mm	12 mm	✓
	FK883R	3 mm 	standardowa	140 mm	12 mm	✓
	FK884R	4 mm 	standardowa	140 mm	12 mm	✓
	FK885R	5 mm 	standardowa	140 mm	12 mm	✓
	FK886R	6 mm 	standardowa	140 mm	12 mm	✓
285 mm	FK892R	2 mm 	standardowa	190 mm	12 mm	✓
	FK893R	3 mm 	standardowa	190 mm	12 mm	✓
	FK894R	4 mm 	standardowa	190 mm	12 mm	✓
	FK895R	5 mm 	standardowa	190 mm	12 mm	✓
	FK896R	6 mm 	standardowa	190 mm	12 mm	✓

FK888SU

Jednorazowa rurka (3 m)

Jednostka sprzedaży: PAK = Zestaw 10 rurek

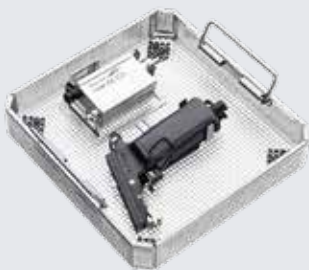

FK881R

System do składowania rączki i reduktora ciśnienia KAIRison®



FK891R

System do składowania trzonów KAIRison®



GA466

Pneumatyczny wąż (5 m) z przyłączem Aesculap-Dräger



GA468

Pneumatyczny wąż (5 m) z przyłączem Aesculap-Schrader

