

B. Braun Regionalna Anestezja: Znieczulenia zewnątrzoponowe



B. Braun Znieczulenie zewnątrzoponowe

Wysoka jakość w Twoich doświadczonych rękach.


Igły zewnątrzoponowe B. Braun

Ze względu na często występujące różnice anatomiczne pomiędzy pacjentami, ważny jest właściwy dobór odpowiednich igieł do znieczuleń zewnątrzoponowych.


Korzystając z igieł firmy B.Braun użytkownik jest pewien precyzji wykonania i niezawodności ich działania.

Igła typu Tuohy

- Unikalne wygięcie i kształt szlif: Znakomite wycucie i rozróżnienie poszczególnych warstw tkanek
- Najwyższa jakość wykonania szlif: Stała odpowiedź tkankowa w każdej procedurze
- Gładkie wewnętrzne krawędzie szlif: Minimalizacja ryzyka uszkodzenia cewnika

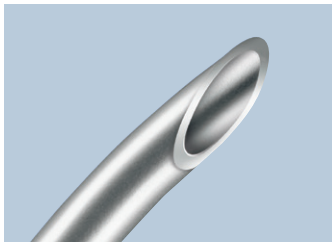

Gładkie wewnętrzne krawędzie szlif minimalizują ryzyko uszkodzenia cewnika

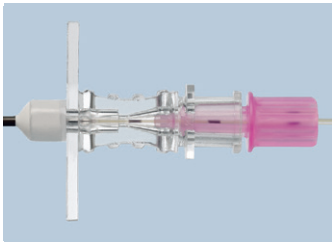

Element wprowadzający znajdujący się na cewniku dokładnie dopasowany do uchwytu igły



Bezpieczne wsunięcie cewnika do igły za pomocą elementu wprowadzającego



Cewniki Perifix® są bardzo wysoko oceniane na świecie

Rosnące użycie cewników zewnątrzoponowych w wielu zestawach do znieczuleń, analgezji i leczeniu bólu wymaga specyficznych cech i różnorodności w zależności od zastosowania.

Cewniki Perifix® wykonane są w unikalnej formule, poliamid nie zawiera plastifikatorów i lateksu, posiada bardzo wysoką biokompatybilność.

Korzyści dla użytkownika – bezpieczeństwo procedury

- Cewniki Perifix® Standard i Soft Tip
 - znakomita stabilność i odporność na zaginanie przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na łatwe wprowadzenie i usunięcie cewnika
 - wysoka przezroczystość cewnika dla lepszej wizualizacji płynów
- Cewniki Perifix® Soft Tip posiada dodatkowo cechy:
 - elastyczna i atraumatyczna końcówka cewnika
 - redukuje ryzyko perforacji
- Perifix® ONE
 - wysoki odsetek powodzeń i mało komplikacji, łatwy i bezpieczny do założenia
 - znakomite rozprzestrzenianie się leku
 - kolor cewnika wyklucza możliwość pomyłek – element bezpieczeństwa

Perifix® – najbardziej kompleksowa oferta cewników zewnątrzoponowych

Łatwe wprowadzenie cewnika wymaga relatywnie sztywnego cewnika dla łatwego wprowadzenia do przestrzeni zewnątrzoponowej : Perifix® Standard.

Z drugiej strony miękki cewnik sprawia większe problemy z wprowadzeniem i usunięciem.

Idealny cewnik zewnątrzoponowy jest połączeniem sztywności i elastyczności z bardzo miękką, atraumatyczną końcówką cewnika: Perifix® Soft Tip.

Obecnie idealna sztywność dla wprowadzania cewnika oraz pożądana miękkość dla umieszczenia cewnika wewnątrz ciała łączą się w żółtym cewniku z nową końcówką i 3 parami laserowo wyciętych mikro otworów: Perifix® ONE.


Wysoko elastyczny i odporny na załamania poliamidowy cewnik redukuje powstawanie okluzji



Cewniki :

- Perifix® ONE Paed i Perifix ONE (1)
- Perifix® Standard z zamkniętym końcem i 3 otworami bocznymi (2)
- Wysoko elastyczny koniec cewnika i standardowa sztywność z 3 otworami bocznymi: Perifix® Soft Tip (3)

Skala 20:1

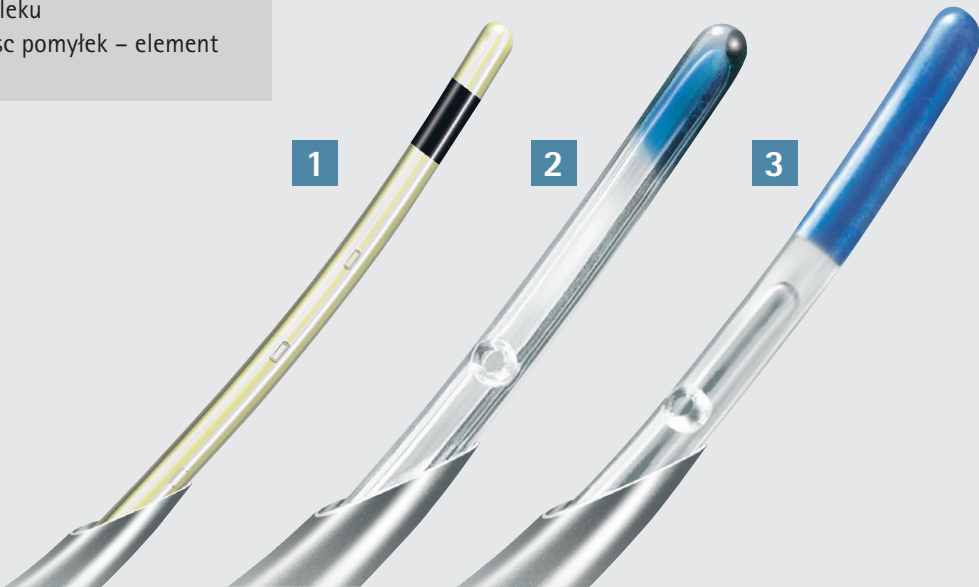

B. Braun Znieczulenie zewnątrzoponowe

Innowacyjna linia – Perifix®

Strzykawka do metody spadku oporu (LOR)

Czytelna identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej nie wymaga tylko umiejętności i doświadczenia po stronie anestezjologów, ale również wysokiej dokładności strzykawek LOR. Strzykawka Perifix® LOR przeznaczona jest do techniki spadku oporu zarówno z zastosowaniem powietrza jak i soli fizjologicznej. Wszystkie strzykawki Perifix® LOR nie zawierają lateksu. Poprawne wykonanie techniki LOR wymaga dobrego dopasowania igły Tuohy do strzykawki.

Korzyści dla użytkownika

- Łatwość przesuwu tłoka dzięki znakomitym cechom ślizgowym
- Paraboliczna skala na strzykawce zapobiega pomyleniu jej ze standardową strzykawką
- Nie zawiera lateksu



Filtr Perifix® z PinPad

W znieczuleniu zewnątrzoponowym filtry stanowią dodatkowy stopień bezpieczeństwa i ochrony przed infekcjami bakteryjnymi. Minimalna powierzchnia zalegania zapewnia właściwe dawkowanie. Filtry posiadają wysoką odporność ciśnieniową do 7 bar, zapewnia to bezpieczeństwo podczas ręcznej iniekcji leków. Zastosowanie elementu mocującego filtr do skóry – Perifix® PinPad oszczędza czas. Samoklejący, nie zawierający lateksu i hipoalergiczny podkład piankowy może być umocowany szybko na skórę, ułatwiając zachowanie higieny i zapewniając komfort.

Korzyści dla użytkownika

- Filtr Perifix® z PinPad
 - zwiększa komfort i higienę pacjenta
 - łatwe mocowanie, oszczędność czasu
- Łącznik Perifix®
 - bezpieczne i pewne mocowanie cewnika
 - łatwy w użyciu, ergonomiczny kształt
 - czytelne potwierdzenie pozycji zamknięty/otwarty




Perifix® System mocowania cewnika do skóry

System mocowania cewnika do skóry zapewnia łatwość mocowania i zwiększa bezpieczeństwo. Po zamocowaniu zmiana położenia cewnika jest niemożliwa. Kontrolę miejsca punkcji można przeprowadzić bez ryzyka zmiany położenia cewnika. Płaski kształt elementów mocujących cewnik zapewnia wygodę dla pacjenta.

Korzyści dla użytkownika

- Element mocujący cewnik:
 - zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie uniemożliwiające ruch cewnika
- Opatrunek:
 - zapewnia komfortową ochronę miejsca wkłucia
 - może być łatwo wymieniany bez ryzyka zmiany położenia cewnika

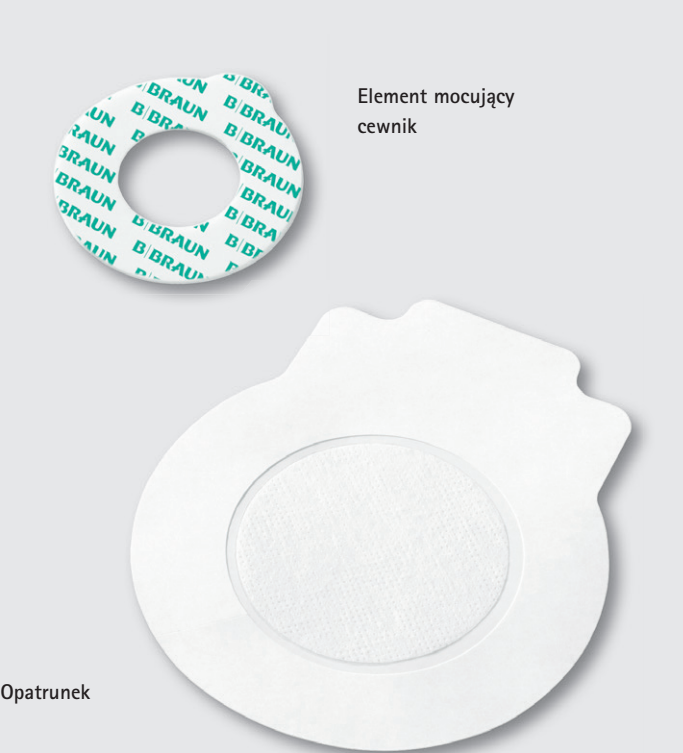

Łatwa kontrola miejsca punkcji dzięki półprzezroczystemu opatrunkowi




Płaski kształt zapewnia wysoki komfort pacjentowi



Zestawy B. Braun do znieczuleń zewnątrzoponowych

Specyfikacja

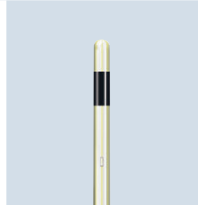Perican® igła zewnątrzoponowa typu Tuohy ■ 20 G ø 0.9 mm / Długość 50 mm ■ 18 G ø 1.3 mm / Długość 80 mm ■ 18 G ø 1.3 mm / Długość 50 mm (zestaw pediatryczny) □ 16 G ø 1.7 mm / Długość 80 mm								
	Perican® igła zewnątrzoponowa typu Tuohy	Perifix® Cewnik zewnątrzoponowy ONE, 6 otworów	Perifix® Cewnik zewnątrzopon., 3 otwory	Otwór na końcu	3 otwory boczne	Perifix® LOR – strzykawka do metody spadku oporu,		
	50 / 80 mm	120 mm	24 G	20 G	19 G	20 G	19 G	20 G

Pełne zestawy	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Standard	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 420	■		•		
	Perifix® 421	■		•		•
	Perifix® 430	□		•		
	Perifix® 431	□		•		•
	Perifix® 620	■				
Perifix® z cewnikiem z miękką końcówką	Perifix® 900	■			•	
	Perifix® 901	■			•	•
Perifix® z cewnikiem ONE	Perifix® ONE 420	■	•			
	Perifix® ONE 421	■	•			•
	Perifix® ONE 430	□		•		
	Perifix® ONE 431	□		•		•
Zestawy z filtrem	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Standard	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 400	■		•		
	Perifix® 401	■		•		•
	Perifix® 402	□		•		•
	Perifix® 405	□		•		
	Perifix® 451	■		•		•
Perifix® z cewnikiem z miękką końcówką	Perifix® 700	■			•	
	Perifix® 701	■			•	•
	Perifix® 730	□			•	•
	Perifix® 750	■			•	•
Perifix® z cewnikiem ONE	Perifix® ONE 400	■	•			
	Perifix® ONE 401	■	•			•
	Perifix® ONE 402	□		•		•
	Perifix® ONE 405	□		•		
	Perifix® ONE 418	■	•			•
Zestawy pediatryczne z filtrem	Perifix® ONE Paed 18	■	•			•
	Perifix® ONE Paed 20	■	•			•
Zestawy ze standardowym cewnikiem	Nazwa	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Standard	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR
Perifix® z cewnikiem standardowym	Perifix® 100	■		•		
	Perifix® 300	■		•		
	Perifix® 301	■		•		•
	Perifix® 302	□		•		•
	Perifix® 310	□		•		

średnica cewników wyrażona w gauge (G) zgodnie z norma EN ISO 9626

						* Sterican® igły 25G Długość 16 mm, ø 0.5 mm 21G Długość 40 mm, ø 0.8 mm 18G Długość 40 mm, ø 1.2 mm
Omnifix® 3-częściowa strzykawka 3ml, Luer-Lock	Omnifix® Omnifix 3-częściowa strzykawka 3ml, 20ml, Luer-Lock , 3 igły iniekcyjne*	Omnifix® Omnifix 3-częściowa strzykawka 3ml, 10ml, 20ml, Luer-Lock , 3 igły iniekcyjne*	Perifix® filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm , wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar	Perifix® mocowanie filtra do skóry	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	

Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
	•	•	•	•	•	10	4514203
	•		•	•	•	10	4514211
		•	•	•	•	10	4514300
	•		•	•	•	10	4514319
		•	•	•	•	10	4516206
		•	•	•	•	10	4510291
	•		•	•	•	10	4510305
		•	•	•	•	10	4514203C
	•		•	•	•	10	4514211C
		•	•	•	•	10	4514300C
			•	•	•	10	4514319C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
			•		•	20	4514009
			•		•	20	4514017
			•		•	20	4514025
			•		•	20	4514050
			•	•	•	20	4514513
			•	•	•	20	4510216
			•		•	20	4510097
			•	•	•	20	4517309
			•	•	•	20	4517504
			•		•	20	4514009C
			•		•	20	4514017C
			•	•	•	20	4514025C
			•	•	•	20	4514050C
			•	•	•	10	4514183C
			•	•	•	20	4514513C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
•			•	•	•	10	4512006C
•			•	•	•	10	4512014C
Omnifix®	Omnifix®/Sterican®	Omnifix®/Sterican®	Perifix® Filtr	Perifix® Pin-Pad	Perifix® łącznik filtra z cewnikiem	Jednostka sprzedaży	Nr katalogowy
					•	20	4511000
					•	20	4513002
					•	20	4513010
					•	20	4513029
					•	20	4513100

